

ProCare

Dent 40



Additivo per il risciacquo finale

Concentrato liquido. Per il trattamento automatico di strumentario dentale inclusi strumenti di trasmissione nei termodisinfettori Miele Professional.


Marchio di qualità

ProCare Dent 40 ottempera ai requisiti della direttiva 93/42/CEE allegato I sui dispositivi medici. **CE**

Caratteristiche del prodotto

- Migliora e accelera l'asciugatura di strumentario dentale nel trattamento automatico.
- Neutralizza resti alcalini e tracce di acque alcaline.

ProCare Dent 40 è adatto al solo uso professionale.

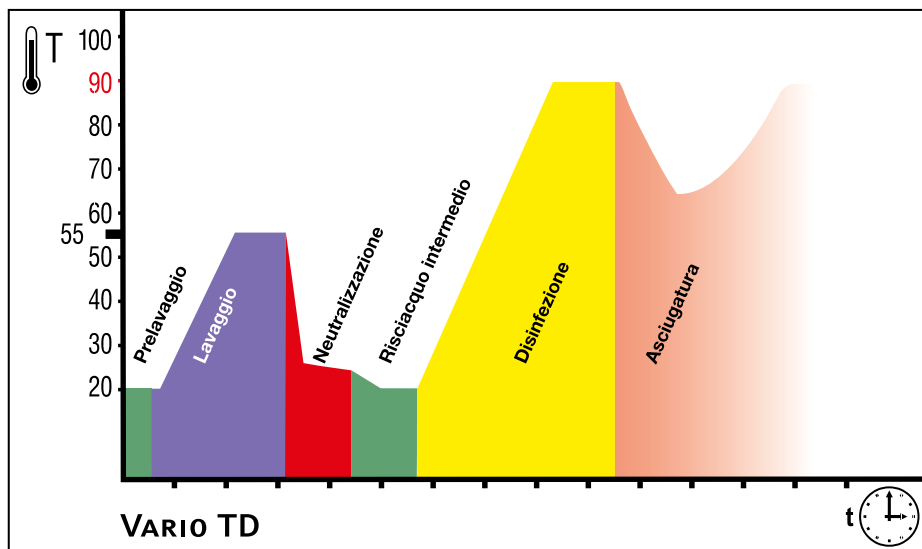

Uso e dosaggio

Miele ProCare Dent 40 è studiato appositamente per i trattamenti nei termodisinfettori Miele Professional.

- Concentrazione per l'impiego: 0,3 ml/l tramite contenitore sportello
- Programma varioTD

Nel risciacquo finale si consiglia di impiegare acqua demineralizzata per evitare la formazione di patine e macchie d'acqua e per preservare l'alluminio anodizzato.

Procedimento varioTD

- Risciacquo con acqua fredda per rimuovere lo sporco più tenace (ad es. sangue)
- Lavaggio
- Neutralizzazione
- Risciacquo intermedio con acqua fredda
- Disinfezione termica a 93°C/5 min. tempo di azione e risciacquo finale con ProCare Dent 40 (temperatura di dosaggio 93°C)
- Asciugatura

Da notare!

- Non mescolare con altri prodotti.
- Per la sostituzione dei prodotti richiedere l'intervento dell'assistenza tecnica Miele.
- Il trattamento deve essere eseguito con idonei processi validati in conformità alle normative vigenti e alla direttiva sui dispositivi medici.
- Attenersi alle indicazioni di trattamento del produttore degli strumenti in conformità alle disposizioni della norma DIN EN ISO 17664.
- Osservare le istruzioni d'uso dei termodisinfettori Miele Professional.

ProCare

Dent 40




Dati tecnici

- Densità (20°C): ca. 1,1 g/cm³
- Valore pH (determinato in acqua demineralizzata, 20°C) 0,3 ml/l: ca. 3,8

Componenti ai sensi del regolamento europeo sui detersivi 648/2004

- < 5% di fosfonati
- 15 – 30% di tensioattivi non ionici
- conservanti (methylchloroisothiazolinone / methylisothiazolinone)

Condizioni di stoccaggio

- Temperatura di conservazione da rispettare: da 0°C a 30°C
- In corrette condizioni di stoccaggio ha una validità di 3 anni
- Scadenza: v. scritta sull'etichetta dopo il simbolo 

Indicazioni di pericolo e istruzioni di sicurezza

- Per ulteriori informazioni in materia di sicurezza e ambiente consultare le schede dati di sicurezza CE.

Queste sono disponibili sul sito www.miele-professional.it.

Smaltire i contenitori vuoti e chiusi. Per lo smaltimento di residui di sostanze: v. scheda dati di sicurezza.

I dati della presente scheda rispecchiano lo stato di conoscenze ed esperienze attuali. Non si esime l'utente dall'effettuare verifiche ed esperimenti in proprio. Il presente documento non implica una garanzia giuridicamente vincolante in merito a determinate caratteristiche del prodotto.

Confezione disponibile

Denominazione	Confezione	Numero d'ordine
ProCare Dent 40	flacone da 1 l (cappuccio con beccuccio)	9 175 600

Contatti:

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Telefono 0471 666319
www.miele-professional.it



Azienda Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de